

sim-slide®

another Arion brand

Sim-Slide - The New Standard

Dé oplossing voor zowel het aan- als uittrekken van therapeutische elastische kousen met open teen in één product.



Probleemstelling

Het aan- en uittrekken van therapeutische elastische kousen en panty's is voor zowel patiënten als zorgverleners een dagelijks terugkerende en moeizame handeling.

In de CAO 'arbeid en gezondheid, verpleeg- en verzorgingshuizen' wordt het aan- en uittrekken van elastische kousen als derde hoofdbron van fysieke belasting genoemd. Hieromtrent is de volgende praktijkrichtlijn geformuleerd:

'Niet meer trekken dan 15 kilo in een gunstige, of 5 kilo in een ongunstige houding.'

Effectief betekent dit dat bij het aan- of uittrekken van een therapeutische elastische kous van drukklasse twee of hoger altijd een aan/uittrekhelpmiddel gebruikt dient te worden.

Ook voor patiënten die deze zorgtaak nog zelfstandig uitvoeren wordt de fysieke belasting een steeds groter probleem, zelfs zodanig dat dit direct effect heeft op de therapietrouw.

Oplossing

Sim-Slide is specifiek ontwikkeld om de problemen van het aan- en uittrekken van therapeutische elastische kousen met open teen op te lossen. De Sim-Slide is gemaakt van zeer glad materiaal dat bewerkt is met een speciale coating. Deze eigenschap vormt samen met de dubbellaagse toepassing een ultraglad eindproduct met een zeer hoge wrijvingsreductie.

De wrijvingsreductie van de Sim-Slide zorgt ervoor dat de fysieke belasting voor zorgverleners en patiënten tot een minimum wordt beperkt. Dit heeft tevens een positief effect op de therapietrouw bij patiënten. Hiernaast kan de patiënt door de eenvoudige en duidelijke gebruiksaanwijzingen nog lange tijd onafhankelijk therapeutische elastische kousen en panty's met open teen aan- en uittrekken.

Doelgroep

Sim-Slide biedt een uitkomst voor patiënten die therapeutische elastische kousen of panty's met een open teenstuk dragen.

Dankzij de Sim-Slide kunnen deze kousen nu makkelijk worden aan- of uitgetrokken.

Daarnaast is Sim-Slide een onmisbaar helpmiddel voor zorgverleners die dagelijks de zware taak hebben om therapeutische elastische kousen en panty's bij patiënten aan- en uit te trekken.

Sim-Slide®

Één oplossing voor twee problemen!

Productvoordelen

- Twee in één
- Reductie fysieke belasting voor de zorgverlener en de patiënt
- Toename zelfstandigheid en therapietrouw van de patiënt
- Elastische kousen behouden langer hun therapeutische druk
- Eenvoudig in gebruik
- Bespaart tijd en kosten
- Lange levensduur
- Makkelijk mee te nemen

Assortiment

Art.Nr.	maat	schoenmaat
EoSLo1	Small	34-37
EoSLo2	Medium	38-41
EoSLo3	Large	42-45
EoSLo4	Extra Large	≥46

ON



Schuif de Sim-Slide over de voet. Om te voorkomen dat de Sim-Slide van de voet glijdt, trekt u losjes aan de oranje knopjes.



Schuif de kous over de Sim-Slide.



Trek de kous over de hiel.




Leg één hand stevig op de hiel en trek met de andere hand aan de lus van de Sim-Slide.



Trek de Sim-Slide met kleine bewegingen naar buiten.

OFF

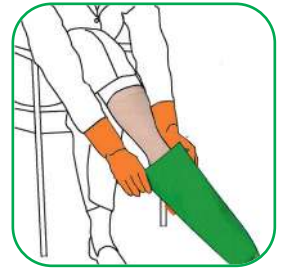

Schuif de Sim-Slide over de kous.



Trek stevig aan de oranje knopjes zodat de Sim-Slide wordt gefixeerd vlak boven de enkel.



Vouw de kous zo ver mogelijk over de Sim-Slide.



Schuif de kous en de Sim-Slide, te beginnen bij de hiel, met kleine bewegingen over de hiel.